

Beaver Visitec

mini lame ultima generazione



corrispondenza

codice precedente	nuovo codice
	Beav - 6401
376400	Beaver 6400
376600	Beaver 6600
376610	Beaver 6610
376700	Beaver 6700
376900	Beaver 6900
376910	Beaver 6910

descrizione



Beav - 6401 micro lama
punta arrotondata, affilata da un lato, n° 24 lame per scatola



Beaver 6400 colore verde
punta arrotondata, affilata da un lato, verde, n° 20 lame per scatola



Beaver 6600 colore nero
lamellare, punta arrotondata, angolata di 60°, superficie inferiore liscia, smussata, n° 3 lame per scatola



Beaver 6610 colore nero
lamellare, diritta, superficie inferiore liscia, n° 20 lame per scatola



Beaver 6700 colore arancio
lama diritta a punta, affilata da un solo lato, n° 20 lame per scatola



Beaver 6900 colore azzurro
diritta, superficie di taglio 180°, doppio smusso, n° 20 lame per scatola



Beaver 6910 colore blu
angolata di 60°, superficie di taglio 180°, doppio smusso, n° 6 lame per scatola

Mini Lame

bvi Beaver Visitec

CE 0086

Distribuito da



Via Donatori del Sangue, 1 - 58015 Orbetello (GR)


Tel. 0564 862089 - 865442 - Fax 0564 862041 - e-mail info@nikestrumenti.it




vantaggi

- sicurezza:** minori rischi di tagli accidentali nella fase di inserimento della lama nel mandrino
- efficacia:** il filo della lama, per quanto resistente, risente ogni volta che casualmente la lama viene a contatto con il metallo, ad esempio il blister;
- ergonomia:** in fase di lavaggio e sterilizzazione del manico non serve svitare e riavvitare il mandrino, evitandone così la perdita
- colore:** permette di codificare e distinguere più facilmente le lame

istruzioni per l'assemblaggio

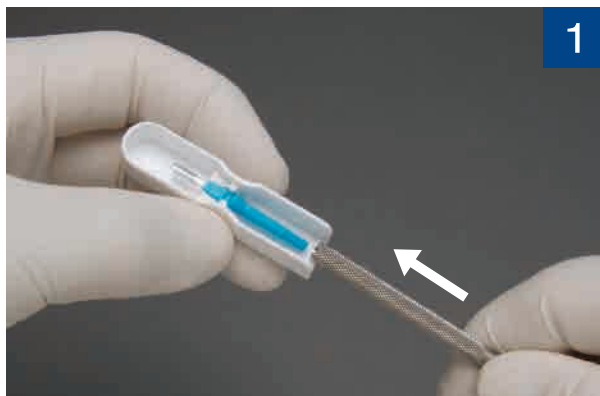

Tenere il contenitore della Mini-Lama Beaver tra il pollice e l'indice

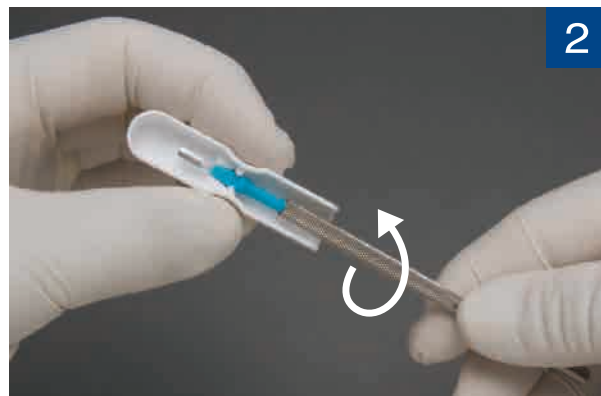

Inserire il manico Beaver in senso orario sulla punta filettata



Continuare ad inserire il manico fino a che la filettatura è completamente occupata e la lama è sbloccata dal contenitore




Sollevare per rimuovere la Mini-Lama Beaver dal contenitore



BEAV-1350
MANICO PORTALAMA
cm.13 INOX



BEAV-1360
MANICO PORTALAMA
cm.13 INOX

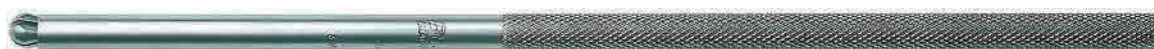

BEAV-1320
MANICO PORTALAMA
cm.15,5 INOX



BEAV-1305
RICAMBIO STRINGILAMA